

Produktkatalog

Dreiräder

Elektromobil-Dreirad

Tiefeinsteiger Fahrräder

Laufhilfe

Parallel Tandems

Tandems

Rollstuhlfahrräder

Transportfahrrad



vanraam®
Let's all cycle



Van Raam Geschäftsführung: Marjolein, Ronald und Jan-Willem

Scannen Sie den QR-Code

In diesem Produktkatalog werden QR-Codes verwendet. Diese QR-Codes enthalten einen Link zu einer Seite auf der Website von Van Raam. Die Webseite enthält weitere Informationen zu dem jeweiligen Thema.

Ein QR-Code kann gescannt werden, indem Sie die Kamera Ihres Smartphones/Tablets öffnen und auf den QR-Code zeigen. Es erscheint ein Link, auf den Sie klicken können und Sie werden auf die Website weitergeleitet. Funktioniert es nicht? Laden Sie dann eine QR-Code-Scanner App aus dem App-Store Ihres Smartphones/Tablets herunter.

Scannen Sie diesen QR-Code und Sie werden weitergeleitet nach www.vanraam.com



Let's all cycle!

Wir glauben, dass wenn Menschen länger mobil und unabhängig sind, sie sich glücklicher fühlen. Darum bieten wir Menschen mit einer Behinderung, die nicht mit einem herkömmlichen Fahrrad fahren können, eine nachhaltige und zeitgemäße Mobilität. Mit einem Van Raam Fahrrad erleben Sie Unabhängigkeit und Freiheit. Das ist unsere Vision und der Grund für unsere Existenz.

Wir sind ein Familienunternehmen mit einer 110-jährigen Geschichte. Seit den 1980-er Jahren haben wir uns auf das Design und die Produktion von einzigartigen Spezialfahrrädern spezialisiert.

Wir sind stolz auf das, was wir gemeinsam erreichen und auf die nachhaltige Wirkung, die wir bei unseren Kunden haben. Wir tun dies derzeit mit rund 300 Mitarbeitern. Let's all cycle!

Marjolein Boezel

Jan-Willem Boezel

Ronald Ruesink



4



30



54



56

Inhalt

Let's all cycle!	2
Selbstständiges Radfahren	4
Dreiräder	4
Elektromobil-Dreirad	24
Tiefeinsteiger Rad	26
Laufhilfe	28
Gemeinsam Radfahren	30
Parallel Tandems	30
Tandems	36
Rollstuhlfahrräder	42
Transportfahrrad	48
Technische Spezifikationen	50
Optionen/Zubehör	52
Tretunterstützung (Smart E-Bike)	54
Über Van Raam	56
Anschaffung	60
Service	62



Selbständig Radfahren

Dreiräder

Dreiräder ermöglichen es Menschen mit einer Behinderung, eine längere Zeit selbstständig Fahrrad zu fahren. Die drei Räder sorgen für Stabilität und Sicherheit beim Radfahren.

Van Raam hat verschiedene Dreiradmodelle für alle Altersgruppen. Es gibt fast immer ein Fahrrad, das zu Ihren Bedürfnissen passt.

Vorteile

- ✓ Anhalten ohne abzustiegen
- ✓ Dreiräder bieten Stabilität beim Radfahren
- ✓ Viele verschiedene Modelle
- ✓ Feststellbremse ermöglicht ein sicheres Auf- und Absteigen
- ✓ Sie müssen sich nicht selbst ausbalancieren



Easy Rider

Sessel Dreirad

Das Easy Rider ist ein Dreirad für Erwachsene mit optimalen Fahreigenschaften, damit können Sie problemlos radeln. Durch den einzigartigen Rahmen ergibt sich ein niedriger Einstieg und der Schwerpunkt liegt tiefer. Dies sorgt für ein stabiles und sicheres Gefühl.

Dieses Dreirad hat einen bequemen und leicht verstellbaren Sitz. Die Vorwärtsbewegung beim Treten und die Federung im Rahmen sorgen für perfekten Komfort. Das Easy Rider ist daher für kurze Fahrten, aber auch für längere Fahrradtouren geeignet.

Das moderne aerodynamische Design mit hydrogeformten Rohren verleiht dem Easy Rider ein sportliches Aussehen. Mit der optionalen Tretunterstützung (Smart E-Bike) wird das Radfahren noch einfacher.

Vorteile

- ✓ Gefederter Rahmen für optimalen Komfort
- ✓ Manövrierfähig durch kleinen Wenderadius
- ✓ Komfortabler Sitz mit Steißbeinentlastung und verstellbarer Rückenlehne
- ✓ Geeignet für bis zu 140 kg (mit verstärktem Rahmen bis zu 180 kg)
- ✓ Einfache Einstellung von Sitz und Lenker

Beliebte Optionen/Zubehör

- Verschiedene Rahmengrößen (M und L)
- Verschiedene Federn für optimalen Komfort
- Stockhalter oder Korb zur Mitnahme von Utensilien
- Sicherheitsgurt, Spiegel, Armlehnen oder Fußschale für mehr Sicherheit
- Zusätzliches Akkupaket oder Akku mit mehr Kapazität für mehr Reichweite



“Mit dem Easy Rider kann ich alleine losziehen und das Radfahren wieder genießen. Der Sitz ist sehr bequem.” - Kristel





Easy Rider Junior

Sessel Dreirad

Das Easy Rider Junior Sessel Dreirad ist für Kinder ab circa 4 Jahren und kleinere Erwachsene konzipiert. Das Fahrrad bietet eine große Stabilität durch den tiefen Schwerpunkt und hat einen niedrigen Einstieg.

Der Sitz mit Rückenlehne und die Federung im Rahmen sorgen für zusätzlichen Komfort beim Radfahren. Das Easy Rider Junior hat ein sportliches und modernes Aussehen.

Dank des einzigartigen Rahmens haben Sie beim Radfahren eine nach vorne gerichtete Tretbewegung, sodass Sie mehr Kraft mit Ihren Beinen aufbringen können. Ein robustes Fahrrad, das für kurze und lange Fahrradtouren geeignet ist.

Vorteile

- ✓ Komfortabler Sitz mit Rückenlehne
- ✓ Gefederter Rahmen für optimalen Komfort
- ✓ Kleiner Wendekreis
- ✓ Passt durch eine normale Türöffnung
- ✓ Niedrige Sitzposition mit tiefem Schwerpunkt für mehr Stabilität

Beliebte Optionen/Zubehör

- Tretunterstützung (Smart E-Bike)
- Fußschale oder Kurbelverkürzer für Pedalanpassungen
- Spiegel für zusätzliche Sicherheit
- 8-Gang Schaltung mit Freilauf oder Rücktrittbremse
- Korb zur Mitnahme von Utensilien



||

„Unsere Tochter mit Gleichgewichtsproblemen ist sehr glücklich und stolz auf dieses Dreirad.“ – Fam. Meyer



Easy Sport

Liegedreirad

Das Easy Sport ist ein ideales Dreirad für sportliche Menschen, die auch den Komfort schätzen. Dieses Dreirad hat einen ergonomisch verstellbaren Sitz mit Rückenlehne, mit dem sowohl eine sportliche als auch eine gemütliche Runde geradelt werden kann.

Dank des Unterlenkers werden Ihr Rücken, Nacken, Schultern und Handgelenke weniger belastet. Das Easy Sport ist in der Länge verstellbar, sodass Sie die ideale, an Ihre Körpergröße angepasste Radfahrposition erhalten.

Die Federung im Rahmen gibt Ihnen zusätzlichen Komfort beim Radfahren.

Mit der optionalen Tretunterstützung wird das Radfahren mit dem Easy Sport noch einfacher.



II

„Ich kann meinen Arm nicht richtig hochheben. Dieses Fahrrad mit Untersteuerung ist die Lösung. Es ist fantastisch!“ – Daniel

Vorteile

- ✓ Komfortabler Sitz mit Rückenlehne
- ✓ Weniger Last für Rücken, Nacken, Schultern & Handgelenke durch Unterlenker
- ✓ Federung bietet zusätzlichen Komfort
- ✓ Einfaches Auf- und Absteigen
- ✓ In der Länge einstellbar

Beliebte Optionen/Zubehör

- Tretunterstützung (Smart E-Bike)
- 8-Gang Schaltung mit Freilauf oder Rücktrittbremse
- Bedienung auf einer Seite des Lenkers oder einhändig bedienbares Schloss
- Verschiedene Sitze (XL-Sitz oder Liegesitz)
- Fußschale zur Befestigung an der Pedale



Maxi

Traditionelles Dreirad

Das Maxi ist ein traditionelles, aber trendiges Dreirad für Erwachsene. Dank der drei Räder haben Sie eine stabile Sitzposition und fahren mit einem sicheren Gefühl. Des Weiteren ist das Fahrrad leicht und wendig.

Das Maxi hat eine hohe Sitzposition, die Ihnen während einer Fahrradtour einen guten Überblick über die Straße und die Umgebung gibt. Nach einem Einkaufsbummel können Sie Ihre Einkäufe im optionalen Einkaufskorb bequem mit auf das Fahrrad nehmen.

Dank des leicht zugänglichen Einstiegs ist das Auf- und Absteigen einfach. Natürlich ist das Maxi auch mit einem Elektromotor zur Tretunterstützung erhältlich.



“Aufgrund eines Infarkts konnte ich nicht mehr Rad fahren. Das Maxi kam als die Lösung, damit das wieder möglich ist!” - Eva

Vorteile

- ✓ Stabiles Dreirad im 'klassischen' Design
- ✓ Hohe Sitzposition, bietet einen guten Überblick
- ✓ Leichtgängig und manövrierfähig dank eines Differentials
- ✓ Passt durch eine normale Tür
- ✓ Sicheres Auf- und Absteigen durch die Verwendung der Feststellbremse

Beliebte Optionen/Zubehör

- Tretunterstützung (Smart E-Bike)
- 8-Gang Schaltung oder Ergogel-Sattel für komfortables Radfahren
- Spiegel oder Fußschale für zusätzliche Sicherheit
- Pannensichere Reifen
- Korb oder Stockhalter zur Mitnahme von Utensilien



Maxi Comfort

Dreirad mit niedrigem Einstieg

Van Raam bietet eine Variation des traditionellen Dreirads an. Das Dreirad Maxi Comfort hat einen extra niedrigen und breiten Einstieg. Dies macht das Auf- und Absteigen auf das Fahrrad sehr einfach.

Bei diesem Dreirad sitzen Sie nicht über dem Tretlager, sondern leicht dahinter. Dadurch können Sie eine optimale Kniebewegung ausführen und sitzen dennoch etwas tiefer. Aufgrund des tieferen Schwerpunkts ist das Dreirad sehr komfortabel zu fahren.

Sie suchen ein Tiefeinsteiger Fahrrad mit zwei Rädern? Dann könnte das Balance eine gute Wahl sein. Sehen Sie sich das Balance auf Seite 26 an.



//

“Das Maxi Comfort Dreirad gibt mir Vertrauen und Sicherheit, um wieder auf die Straße zu gehen.” - Gerda

Vorteile

- ✓ Einfaches Auf- und Absteigen durch extra niedrigen Einstieg
- ✓ Ergonomische und komfortable Sitzposition
- ✓ Mehr Kraft, durch Tretbewegung nach vorn
- ✓ Semi-hohe Sitzposition, bietet einen guten Überblick
- ✓ Leichtere Lenkung als beim Standard-Dreirad

Beliebte Optionen/Zubehör

- Tretunterstützung (Smart E-Bike)
- Verschiedene Rahmengrößen
- Rückenlehne (mit Gurt) oder Fußschale zur Fixierung und Sicherheit
- Korb oder Stockhalter zur Mitnahme von Utensilien
- 8-Gang Schaltung mit Freilauf oder Rücktrittbremse





“Am Anfang wollte ich kein Dreirad, aber mit dem Midi ist alles einfacher geworden. Ich kann überall hin.” – Peter

Vorteile

- ✓ Stabiles Dreirad im ‘klassischen’ Design
- ✓ Wendig und leichtgängig, u. a. durch ein Differential
- ✓ Hohe Sitzposition, bietet einen guten Überblick
- ✓ Passt durch eine normale Tür
- ✓ Sicheres Auf- und Absteigen durch die Verwendung der Feststellbremse

Beliebte Optionen/Zubehör

- Tretunterstützung (Smart E-Bike)
- 8-Gang Schaltung mit Freilauf oder Rücktrittbremse
- Rückenstütze (mit Gurt) zur Fixierung und Sicherheit
- Einhändig bedienbares Schloss zum einfachen Verschließen
- Korb oder Stockhalter zur Mitnahme von Utensilien



Midi

Traditionelles Dreirad

Das traditionelle Midi Dreirad ist für ältere Kinder ab circa 8 Jahren oder kleinere Erwachsene geeignet.

Dieses trendig designte Fahrrad ist wendig und leicht zu handhaben. Aufgrund der drei Räder ist das Midi sehr stabil. Dank der hohen Sitzposition haben Sie eine gute Sicht auf den Verkehr und die Umgebung.

Trotz der drei Räder können Sie problemlos durch eine normale Tür fahren, sodass Sie das Fahrrad zum Beispiel im Schuppen abstellen können.

Mit optionalen Extras, wie zum Beispiel einer Tretunterstützung, können Sie das Midi an Ihre Bedürfnisse anpassen und das Radfahren noch einfacher machen.



Mini

Kinderdreirad

Das Mini Dreirad ist ein fröhliches Fahrrad für Kinder ab 4 Jahren. Die drei Räder sorgen für Stabilität und erleichtern das Auf- und Absteigen.

Das Mini ist ein leichtgängiges Fahrrad, bei dem die Kinder einfach losradeln können. Es gibt zusätzliche Optionen wie eine Schiebestange, die am Fahrrad angebracht werden kann oder auch eine Rücken- und Fußstütze.

Das Mini ermöglicht es den Kindern wieder mit ihren Freunden und der Familie zu radeln.



"Tim ist sehr froh mit dem Fahrrad. Erst konnte er nicht Fahrrad fahren, jetzt kann er dies mit seinen Freunden." - Fam. Smits



Vorteile

- ✓ Stabiles Fahrrad
- ✓ Sicheres Auf- und Absteigen durch die Verwendung der Feststellbremse
- ✓ Sehr wendig
- ✓ Leichtlaufendes Fahrrad
- ✓ Passt durch eine normale Tür

Beliebte Optionen/Zubehör

- Tretunterstützung (Smart E-Bike)
- Schiebestange
- Fußschale oder Balancepedal mit Ristriemen zur Pedalanpassung
- Anpassungsmöglichkeit in der Rahmenhöhe
- Rückenlehne (mit Gurt) zur Fixierung und Stabilität



Husky

Kinderdreirad

Das fröhliche und bunte Dreirad Husky ist für Kleinkinder ab circa 2 Jahren geeignet, die Schwierigkeiten mit der Stabilität haben.

In der Tretkurbel sind handelsübliche Kurbelverkürzer integriert, sodass ein Kind die Pedale leicht erreichen kann. Darüber hinaus verfügt das Husky über ein speziell konstruiertes Tretlager, das es ermöglicht, gerade nach unten zu treten.

Mit der optionalen Rückenstütze und eventuellem Gurt sitzt ein Kind stabil auf dem Rad. Mit einer Schiebestange können sie geschoben werden, wenn das selbstständige Fahren schwerfällt.

Das Husky ist nicht mit einem Elektromotor zur Tretunterstützung ausgestattet werden.

Vorteile

- ✓ Leichtlaufend und manövrierfähig durch Differential
- ✓ Kurbelverkürzer
- ✓ Speziell entwickeltes Tretlager, um gerade nach unten zu treten
- ✓ Sattel ist mittels Schnellspanner am Sattel einfach in der Höhe verstellbar
- ✓ Bunt und fröhlich

Beliebte Optionen/Zubehör

- Rückenlehne (mit Gurt) zur Fixierung und Sicherheit
- Schiebestange
- Fußschale, breitere Pedale mit Ristriemen für die Pedalanpassung
- Durchgehender Lenker
- Leichtere oder schwerere Übersetzung

//

„Dank dieses Fahrrads kann unsere Tochter wieder mit den anderen Kindern radeln.“ - Rian



Viktoria und Viktor

Dreiräder mit zwei Rädern an der Vorderseite

Das Viktoria und Viktor sind Dreiräder mit zwei Rädern vorne und einem hinten. Diese Fahrräder sind speziell für Personen konzipiert, die Schwierigkeiten haben, die Breite eines Dreirads einzuschätzen.

Der Viktor ist für Erwachsene konzipiert und seine kleine Schwester Viktoria für jugendliche und kleinere Erwachsene. Beide Fahrräder haben einen niedrigen und breiten Einstieg, welcher ein einfaches Auf- und Absteigen ermöglicht.

Durch die drei Räder ist es nicht notwendig, abzusteigen, wenn man (fast) stehen bleibt. Mit der optionalen Tretunterstützung wird das Radfahren noch einfacher.

Vorteile

- ✓ Breite des Fahrrads leicht abschätzbar
- ✓ Niedriger und breiter Einstieg
- ✓ Gute Übersicht durch hohe Sitzposition
- ✓ Stabiles Fahrrad mit drei Rädern
- ✓ Sicheres Auf- und Absteigen durch die Verwendung der Feststellbremse

Beliebte Optionen/Zubehör

- Tretunterstützung (Smart E-Bike)
- Korb oder Stockhalter zur Mitnahme von Utensilien
- Spiegel, Balancepedal oder Fußschale für zusätzliche Sicherheit
- Ergogel-Sattel
- 8-Gang Schaltung mit Freilauf oder Rücktrittbremse



//

„Dank des Viktor habe ich das Vertrauen, die Breite einer Durchgangsstelle richtig einschätzen zu können.“ – Bob



Viktoria



Viktor





Easy Go

Elektromobil Dreirad

Das Easy Go ist ein einzigartiges Fahrrad: Es ist ein (Elektro-) Fahrrad und ein Mobilitätsroller in einem. Sie können während einer Fahrt ganz einfach zwischen den drei Modi wechseln. Sie fahren völlig selbstständig, Sie fahren mit Tretunterstützung oder Sie fahren im Mobilitätsroller Modus.

Elektrisches radeln oder Fahren kann in drei Unterstützungspositionen erfolgen, sowohl vorwärts als auch rückwärts. Im Mobilitätsroller Modus können Sie Ihre Füße auf der klappbaren Fußplatte ablegen. Das Easy Go ist stabil, kompakt und wendig und daher sehr gut zum Einkaufen geeignet. Durch den bequemen Sitz haben Sie außerdem eine aufrechte Sitzposition.



Vorteile

- ✓ Fahrrad, Elektrofahrrad (Smart E-Bike) und Mobilitätsroller in einem
- ✓ Kompakter als ein Mobilitätsroller
- ✓ Vorwärts- und Rückwärtsfahren und radeln
- ✓ Sicher durch die Anti-Kipp-Räder und die Feststellbremse
- ✓ Kein Führerschein oder Fahrunterricht erforderlich

Beliebte Optionen/Zubehör

- Zusätzliches Akkupaket oder Akku mit mehr Kapazität für mehr Reichweite
- Einhändig bedienbares Schloss
- Klappbare Armlehnen
- Blinker Set
- Komfortsitz XL



„Durch meine Krankheit habe ich nicht genug Energie, um Rad zu fahren. Mit dem Easy Go ist es dennoch möglich.“ - Wendy





„Das Balance ist ein schönes Rad, ich komme mit beiden Füßen auf dem Boden. Dadurch fühlt es sich sehr sicher an.“ – Jacqueline



Balance

Tiefeinsteiger Rad

Das Balance ist ein Tiefeinsteiger Fahrrad. Der einzigartige Rahmen ermöglicht Ihnen eine niedrige Sitzposition, sodass Sie beide Füße auf den Boden stellen können. So müssen Sie nicht vom Sattel absteigen und können trotzdem mit optimal gestrecktem Bein Radfahren.

Der Schwerpunkt liegt bei diesem Fahrrad tiefer, was das Radfahren besonders leicht und komfortabel macht. Das Balance hat eine einzigartige ergonomische Sitzposition wodurch Handgelenke, Schultern und der Nacken entlastet werden.

Sie wollen ein Fahrrad mit niedrigem Einstieg und drei Rädern? Dann ist das Maxi Comfort Dreirad eine gute Wahl. Sehen Sie sich das Maxi Comfort auf Seite 14 an.

Vorteile

- ✓ Extra breiter und tiefer Einstieg
- ✓ Immer mit beiden Füßen auf dem Boden, ohne vom Rad abzustiegen
- ✓ Ergonomische Sitzposition
- ✓ Mehr Kraft durch nach vorn gerichtetes Treten
- ✓ Komfortables fahren durch tieferen Schwerpunkt

Beliebte Optionen/Zubehör

- Tretunterstützung (Smart E-Bike)
- Verschiedene Rahmengrößen
- Einhändig bedienbares Schloss
- Stockhalter oder Fahrradtasche zur Mitnahme von Utensilien
- Spiegel für zusätzliche Sicherheit





City

Laufhilfe

Mit der City Laufhilfe oder auch Laufrad genannt, fällt das Laufen oder Stehen deutlich leichter. Ihr Körpergewicht wird vom Sattel getragen, wodurch Rücken, Hüften, Knie und Knöcheln entlastet werden.

Durch den niedrigen Einstieg ist das Aufsteigen sehr einfach. Die Handbremse, die die Laufhilfe fixiert, sorgt dabei für zusätzliche Sicherheit. Ist ein Rollstuhl noch nicht notwendig, doch ein Rollator wird von Ihnen nicht bevorzugt? Mit der City Laufhilfe ist es wieder möglich, längere Strecken zu Fuß zurückzulegen. Außerdem ist diese Laufhilfe in vielen Geschäften erlaubt.

Durch die kompakte Größe und zwei kleine, stabile Räder ist der City sehr wendig.



Vorteile

- ✓ Entlastung von Rücken, Hüften, Knie und Knöcheln
- ✓ Gehen erfordert weniger Aufwand
- ✓ Zusammenklappbar und daher leicht mitzunehmen
- ✓ Kompakt und leicht
- ✓ Manövrierfähig aufgrund der zwei Räder

Beliebte Optionen/Zubehör

- Abnehmbarer Korb am Lenker
- Schnellspanner zum einfachen Einstellen des Lenkers
- Verstärkte Version (bis zu 150 kg)
- Ergogel-Sattel
- Unterschiedliche Rahmenhöhen



„Ich kann ohne meine Gehhilfe nicht leben. Ich mache damit sogar meinen Einkauf und kann in fast jedes Geschäft gehen.“ – Ingrid





Gemeinsam Radfahren

Parallel Tandems

Wenn das selbstständige Radfahren nicht möglich ist, können Sie sich für ein Van Raam Fahrrad entscheiden, bei dem Sie gemeinsam Radfahren können.

Bei einem parallel Tandem sitzen Sie nebeneinander. Beim Fun2Go gibt es einen Fahrer und einen Beifahrer. Der FunTrain ist ein Anhänger, der hinter dem Fun2Go angebracht wird. So kann ein Hauptfahrer mit drei Fahrgästen fahren.

Vorteile

- ✓ Gute Sicht und Kommunikation aufgrund der nebeneinanderliegenden Sitze
- ✓ Ein Hauptfahrer + Passagier(e)
- ✓ Der Passagier kann bereits mitfahren, wenn dieser sich setzen kann
- ✓ Einfach zu bedienen
- ✓ Gemeinsam Radtouren genießen





*“Dank des Fun2Go kommen wir wieder an mehr Orte.
Wir haben unsere Freiheit zurück.” – Olivia*

Vorteile

- ✓ Gute Sicht und Kommunikation durch nebeneinanderliegende Sitze
- ✓ Beifahrer kann bereits mit, wenn dieser sitzen kann (Mittreten ist freiwillig)
- ✓ Leicht zu lenken mit kleinem Wendekreis
- ✓ Eine Person lenkt, beide können in die Pedale treten
- ✓ Komfortabel verstellbare Sitze mit Rückenlehne

Beliebte Optionen/Zubehör

- Tretunterstützung (Smart E-Bike)
- Drehbarer Sitz für einfaches Auf- und Absteigen
- Sitzgurt, Armlehnen oder Fußschale für zusätzliche Sicherheit
- Wegklappbare Fußplatte für Beifahrer
- Schaltnabe, um zu bestimmen, ob der Beifahrer mittreten kann oder nicht



Fun2Go

Parallel Tandem

Mit dem Fun2Go parallel Tandem können Sie gemeinsam Fahrrad fahren. Da Sie nebeneinandersitzen, können Sie gut kommunizieren und gemeinsam die Umgebung genießen.

Der Fahrer hat die volle Kontrolle über das Fahrrad und der Beifahrer kann optional in die Pedale treten. Damit eignet sich dieses Rad sehr gut für das Radfahren mit Personen, die nicht (mehr) selbstständig am Verkehr teilnehmen können.

Das Fun2Go garantiert stundenlangen Fahrspaß und wird unter anderem in Pflegeeinrichtungen eingesetzt. Um ohne große Anstrengung zu radeln, können Sie die elektrische Tretunterstützung wählen.





FunTrain

Parallel Tandem Anhänger

Mit dem FunTrain wird das gemeinsame Radfahren noch einzigartiger. Mit diesem parallel Tandem Anhänger, den Sie mittels einer Anhängerkupplung hinter ein Fun2Go koppeln, kann ein Hauptfahrer mit drei Passagieren radeln.

Der Hauptfahrer sitzt auf dem vorderen parallel Tandem und hat die volle Kontrolle über den Fahrradzug, denn nur der Fahrer kann lenken und bremsen. Der Anhänger hat eine automatische Auflaufbremse, die ein sicheres und einfaches Abbremsen ermöglicht. Im FunTrain sitzen Sie nebeneinander, so können Sie sich gut miteinander verständigen und währenddessen die Umgebung genießen.

Durch das klappbare Stützrad lässt sich der abgekoppelte FunTrain leicht bewegen.



II

„Es ist sehr schön, mit drei Bewohnern rausgehen zu können, sie freuen sich auf die gemeinsamen Fahrten.“ – Kim



Vorteile

- ✓ Eine Begleitperson fährt mit drei Fahrgästen
- ✓ Einfach hinter ein Fun2Go parallel Tandem zu koppeln
- ✓ Gute Sicht und Kommunikation durch nebeneinanderliegende Sitzplätze
- ✓ Leicht verstellbare Sitze mit Rückenlehne
- ✓ Durch das klappbare Stützrad ist der FunTrain einfach zu positionieren

Beliebte Optionen/Zubehör

- Wegklappbare Fußplatte für Passagiere
- Schalt-nabe um zu bestimmen, ob der Beifahrer mittritt oder nicht
- Sitzgurte und Armlehnen für zusätzliche Sicherheit
- Fußschalen zur Pedalanpassung
- Pannensichere Reifen





Tandems

Mit den Tandems von Van Raam kann man das Radfahren gemeinsam genießen. Aufgrund des tiefen Einstiegs und der verschiedenen Optionen werden die Tandems oft von Personen genutzt, die nicht in der Lage sind, selbstständig Rad zu fahren.

Van Raam hat zwei- und dreirädrige Tandems für zwei Erwachsene und Tandems für einen Erwachsenen und ein Kind.

Vorteile

- ✓ Erhöhung der Mobilität
- ✓ Gute Übersicht durch die hohe Sitzposition
- ✓ Tiefer Einstieg
- ✓ In diversen Ausführungen mit verschiedenen Optionen erhältlich
- ✓ Einfach in der Anwendung





Twinny und Twinny Plus

Tandems für Erwachsene

Das Twinny ist ein zweirädriges Tandem für Erwachsene. Bei diesem Fahrrad sitzen Sie während der Fahrt hintereinander. Sie haben mehr Platz zwischen den beiden Sitzen als bei einem herkömmlichen Tandem. Eine Person lenkt und bremst, während beide in die Pedale treten können. Der Hauptfahrer kann optional die Mittretmöglichkeiten des Beifahrers einstellen. Der große Vorteil dieses Tandems ist der niedrige Einstieg. Das Twinny hat eine hohe Sitzposition, die beiden Fahrern einen guten Überblick verschafft.

Das Twinny Plus (basierend auf dem Twinny) ist ein Tandem mit drei Rädern. Das Tolle an diesem Dreirad Tandem mit zwei Rädern an der Hinterseite ist die große Stabilität und das leichte Auf- und Absteigen.

Die Tandems haben einen robusten und stabilen Rahmen, der für gute Fahreigenschaften sorgt.



Twinny



Twinny Plus



Vorteile

- ✓ Zusätzlicher Raum zwischen den beiden Personen
- ✓ Niedriger Einstieg
- ✓ Einfaches Auf- und Absteigen durch den stabilen Ständer am Twinny
- ✓ Durch drei Räder können Sie beim Twinny Plus leicht auf- und absteigen
- ✓ Gute Übersicht durch die hohe Sitzposition

Beliebte Optionen/Zubehör

- Tretunterstützung (Smart E-Bike)
- Wahl zwischen Vorder- und Hinterradlenkung
- Unterschiedliche Rahmenhöhe
- Rückenlehne (mit Gurt) oder Fußstütze zur Fixierung und Sicherheit
- Fahrer kann wählen, ob Beifahrer mitfahren darf/kann/muss

//

„Paul kann nicht selbstständig Rad fahren, hat aber eine gute körperliche Gesundheit. Er genießt das Radfahren.“ - Laura





Kivo und Kivo Plus

Tandems für Kind + Eltern/Begleiter

Das Kivo ist ein zweirädriges Tandem für ein Elternteil oder eine Begleitperson, die mit einem Kind radeln möchte. Das Kind sitzt vorne auf dem Tandem und hat während der Fahrt einen guten Überblick auf die Umgebung.

Der Elternteil sitzt hinten und kann so den Überblick auf das Kind und den Verkehr behalten. Das Kivo hat 8 Gänge und einen schaltbaren Freilauf, sodass die Eltern entscheiden können, ob das Kind mitfahren soll oder nicht.

Das Kivo Plus ist ein dreirädriges Tandem, das für mehr Stabilität beim Radfahren sorgt. Die beiden Hinterräder machen das Auf- und Absteigen auf das Tandem noch einfacher.



Kivo



Kivo Plus



//

„Es ist toll, mit unserer Tochter Rad fahren zu können! Gemeinsam wieder nach draußen und auf den Spielplatz zu gehen.“ – John



Vorteile

- ✓ Gute Sicht auf die Umgebung und die Straße für Eltern/Begleiter und Kind
- ✓ 8 Gänge und schaltbare Freilaufnabe
- ✓ Niedriger Einstieg für Eltern/Begleiter und Kind
- ✓ Fahrer kann wählen, ob Beifahrer mitfahren darf/kann/muss
- ✓ Gute Fahreigenschaften im Vergleich zu Tandems anderer Hersteller

Beliebte Optionen/Zubehör

- Tretunterstützung (Smart E-Bike)
- Rückenstütze (mit Gurt) zur Fixierung und Sicherheit
- Unterschiedliche Rahmenhöhen
- Fußschale oder Kurbelverkürzer zur Pedalanpassung
- Transferständer auf dem Kivo für einfaches Auf- und Absteigen





Rollstuhlfahrräder

Mit den Rollstuhlfahrrädern von Van Raam ist es möglich, gemeinsam mit jemandem zu radeln, der nicht mehr selbst dazu in der Lage ist.

Beim OPair sitzt der Passagier auf dem vorderen Sitz des Fahrrads. Beim VeloPlus kann der Passagier im eigenen Rollstuhl sitzen bleiben.

Vorteile

- ✓ Die Fahrräder können bis zum endgültigen Zielort genutzt werden
- ✓ Gute Sicht für Fahrer und Passagier
- ✓ Einfach zu bedienen
- ✓ Steigerung der Mobilität auf umweltfreundliche Weise
- ✓ Passagier und Begleiter können gemeinsam Fahrradtouren genießen





//

„Leider kann ich nicht selbstständig radeln, aber mit diesem Rad können wir wieder gemeinsam unterwegs sein.“ – Richard



OPair

Rollstuhlfahrrad

Das OPair eignet sich für das Radfahren mit einer Person, die nicht in der Lage ist, selbstständig zu radeln. An der Vorderseite des OPair ist ein bequemer Sitz angebracht, es kann aber optional auch ein eigener Sitz gewählt werden.

Die Sitztiefe und die Rückenlehne können an die Größe des Fahrgastes angepasst werden. Der Fahrer des Fahrrads hat einen guten Überblick über die Straße und der Passagier kann die Aussicht genießen.

Das OPair ist auch mit einem teilbaren Rahmen erhältlich, sodass der vordere Teil vor Ort als Rollstuhl verwendet werden kann.

Vorteile

- ✓ Stabiles Fahren durch Vorderräder mit leichtem Radsturz
- ✓ Leicht zu lenken durch normalen Lenkeinschlag
- ✓ Federung für zusätzlichen Komfort für Fahrer und Passagier
- ✓ Ergonomische Fahrposition für den Fahrer
- ✓ Klappbare und verstellbare Fußstützen für den Passagier

Beliebte Optionen/Zubehör

- Tretunterstützung (Smart E-Bike)
- Teilbarer Rahmen: Vorderteil kann als extra Rollstuhl verwendet werden
- Sitzbreite verstellbar, daher auch für Kinder geeignet
- Verschiedene Gurte oder Fußfixierung für den Passagier
- Extra-Akkupack für eine größere Reichweite





VeloPlus

Rollstuhltransportfahrrad

Das VeloPlus ist ein Fahrrad, das für den Transport von Personen im eigenen Rollstuhl verwendet werden kann. Der Rollstuhl kann mit dem Fahrgast einfach auf die kippbare Plattform geschoben werden, ohne dass Hebehilfen oder große Kraftanstrengung erforderlich sind. Das VeloPlus ist serienmäßig für einen Beifahrer inklusive Rollstuhl bis zu einem Gewicht von maximal 140 kg geeignet.

Der Rollstuhl wird mit einer Rollstuhlverriegelung und einem Gurt sicher am Rollstuhlfahrrad befestigt. Der niedrige Schwerpunkt und die breit aufgestellten Vorderräder machen dieses Fahrrad stabil. Dadurch ist das Fahrrad ideal für Fahrradtouren mit Rollstuhlfahrern.

Die optionale Tretunterstützung macht das Fahren mit diesem modern gestalteten Rollstuhlfahrrad noch einfacher.



„Mit diesem Fahrrad kann ich mit meinem Vater radeln und gemeinsam wieder schöne Ausflüge machen.“ - Jessica



Vorteile

- ✓ Fahrgast kann im eigenen Rollstuhl sitzen bleiben
- ✓ Kippbare Plattform, um den Rollstuhl auf das Rad zu setzen
- ✓ Stabil und wendig durch tiefen Schwerpunkt und mitlenkende Vorderräder
- ✓ Drei Fixierhaken und Gurt zur sicheren Befestigung des Rollstuhls
- ✓ Geeignet für fast jeden manuellen Rollstuhl (max. 74 cm Breite)

Beliebte Optionen/Zubehör

- Tretunterstützung (Smart E-Bike)
- Pannensichere Reifen
- Elektrisches Seil-Windensystem, um den Rollstuhl auf das Rad zu setzen
- Zusätzlicher Akkupack für mehr Reichweite
- Verstärkte Vorderseite (Passagier inklusive Rollstuhl bis 200 kg)





“Unsere Kunden lieben das Radfahren. Sie kommen zu ‘alten’ vertrauten Orten und genießen es.” – Thomas



Chat

Rikscha Transportfahrrad

Das Chat ist eine Rikscha, in der ein Fahrer mit einem oder zwei Fahrgästen auf der Vorderseite radeln kann. Die Fahrgäste sitzen in einem ergonomischen Sitz mit Gurten und Federung. Der Fahrer sitzt dahinter und hat somit eine gute Sicht auf die Fahrgäste und den Verkehr.

Das Chat gibt Menschen die Möglichkeit, sich während einer angenehmen Radtour miteinander zu unterhalten. Das Fahrrad ist für Personen geeignet, die mit einem Fahrer unterwegs sein wollen. Mit dem Chat ist jede Fahrt ein wunderschöner Ausflug!



Vorteile

- ✓ Standardmäßig ausgestattet mit Tretunterstützung (Smart E-Bike)
- ✓ Bequemes und sicheres Sitzen auf der Sitzbank vorne, durch Gurte
- ✓ Einfaches Aufsteigen durch verstellbare Fußplatte
- ✓ Günstiger als der Transport mit Bus/Taxi
- ✓ Leicht zu fahren

Beliebte Optionen/Zubehör

- Ein Verdeck, damit die Passagiere vor Sonne und Regen geschützt sind
- Zusätzlicher Akkupack für mehr Reichweite
- Spiegel für zusätzliche Sicherheit
- Fahrradtasche oder Stockhalter zur Mitnahme von Utensilien
- Beinwärmer, sodass die Passagiere es auch bij kalten Tagen warm haben



Technische Spezifikationen

	Easy Rider M	Easy Rider L	Easy Rider Junior	Easy Sport	Maxi	Maxi Comfort	Midi	Mini	Husky	Viktoria	Viktor	Easy Go	Balance	City	Fun2Go	FunTrain	Twinny	Twinny Plus	Kivo	Kivo Plus	OPair	VeloPlus	Chat
Rahmenhöhe (cm)	-	-	-	-	53 ¹	51 ¹	41 ¹	30 ¹	23 ¹	42	50	-	51 ¹	47 ¹	-	-	52 ¹	52 ¹	30 ¹ vorne 52 ¹ hinten	30 ¹ vorne 52 ¹ hinten	52	52	52
Einstiegshöhe (cm)	35	35	35	31	28	23	25	20	12	19	16,5	28,5	23	22	-	-	37 vorne 44 hinten	37,5 vorne 45 hinten	36 vorne 43 hinten	36 vorne 45 hinten	45	28	45
Gewicht Fahrrad (± kg) (ohne Elektrosystem)	49	51	36	39	29	32	27	21	11	30	30	64	22	9	69	67	35	44	39	48	58	64	97
Max. Gewicht Gepäckträger (kg)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	15	15	20	20	-	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Fahrradlänge (cm)	225 max.	242 max.	175	195-225	180	194	168	136	98	155	173	166	182	113	200	197	259	261	244	246	214	253	232
Fahrradbreite (cm)	78	78	75	80	75	75	75	60	59	80	89	71,5	66	55	113	113	66	75	66	75	76	253	111
Option: teilbarer Rahmen	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-
Max. Benutzergewicht (kg)	140 ²	140 ²	80	120	120	120	90	65	65	110	110	140	120	100 ²	120 ²	120	120	120	120	120	120 ³	110/140 ³	120/200 ³
Innenbeinlänge (cm)	65-88	85-108	47-73 ¹	65-105 ¹	80-95 ¹	76-91 ¹	66-80 ¹	47-59 ¹	35-47 ¹	63-80	75-93	78-90 ¹	76-91 ¹	70-95 ¹	75-90 ¹	75-90 ¹	77-89 ¹	77-89 ¹	50-62 ¹ vorne 77-89 ¹ hinten	50-62 ¹ vorne 77-89 ¹ hinten	80-95	80-95	80-95

¹ = Anpassungsfähig ² = Verstärkte Ausführung möglich

³ = OPair: Fahrer und Passagier jeweils max. 120 kg. VeloPlus: Fahrer max. 110 kg, Passagier + Rollstuhl max. 140 kg* (*Verstärkter Frontbereich max. 200 kg). Chat: Fahrer max. 120 kg und Passagiergewicht im Sitz max. 200 kg.

Optionen/Zubehör

Um ein Van Raam Fahrrad an Ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse anzupassen, ist es möglich, das Fahrrad mit Optionen/Zubehör zu erweitern.

Für jedes Fahrradmodell gibt es spezielle Optionen, die Ihnen beim Radfahren helfen, Komfort bieten und/oder Ihr Fahrrad sicherer machen. Denken Sie hierbei an Fußschalen, Kurbelanpassungen, Gurte, Rückenlehnen, Schalthilfen, spezielle Lenker oder Sättel, Spiegel und Stockhalter. Sie können diese Optionen für jedes Van Raam Fahrrad auf der Website einsehen. Es ist auch möglich, ein Van Raam Fahrrad in fast jeder RAL-Farbe pulverbeschichten zu lassen.

Haben Sie Zweifel an den verschiedenen Optionen? Während eines Termins bei Van Raam schauen wir uns gemeinsam mit einem technischen Berater an, welches Fahrrad mit welchen Optionen am besten zu Ihnen passt. Während dieses Termins können Sie sich auch viele der gewählten Optionen für ein Van Raam Fahrrad ansehen und auch ausprobieren. So können Sie sicher sein, dass Sie die richtigen Optionen für Ihr Fahrrad wählen. Auf Seite 60 finden Sie weitere Informationen über einen Termin bei Van Raam.

Neben den Standardoptionen bietet Van Raam auch kundenspezifische Anpassungen an. Wir fertigen Rahmen für außergewöhnliche Längen, Körpergewichte oder andere körperliche Einschränkungen. Fragen Sie Van Raam nach den Möglichkeiten.

Sehen Sie sich hier neben die beliebtesten Optionen und Zubehörteile von Van Raam an.



Sehen Sie sich alle Optionen und Zubehörteile auf der Website an!

Tretunterstützung (Smart E-Bike)



Fußschale



Sicherheitsgurte



Armlehnen



Korb



Kurbelanpassungen



Rückenlehne (mit Gurt)



Fußplatte



Spezial-Lenker



Tretunterstützung (Smart E-Bike)

Alle Van Raam Elektrofahrräder sind mit dem Silent-System ausgestattet. Dieses System bietet Ihnen die Tretunterstützung beim Radfahren. Das Motorgehäuse, die Akkus, der Controller, die Software und das Smart-Display sind von uns speziell für unsere Spezialfahrräder entwickelt worden. Das System ist einfach zu bedienen und erleichtert das Radfahren.




Vorteile des Silent-Systems

- ✓ Drei verschiedene Unterstützungsmodi und Starthilfe
- ✓ Einfach zu bedienen
- ✓ Nahezu geräuschlose, aber sehr leistungsstarke Elektromotoren
- ✓ Äußerst hochwertige und sichere Akkus
- ✓ Individuell an die Beeinträchtigung einstellbare Unterstützung
- ✓ Seit Jahren Testsieger des ExtraEnergy-Tests
- ✓ Smart E-Bike (IOT connected)
- ✓ Kostenlose Van Raam E-Bike App
- ✓ Mit der Tretunterstützung Vorwärts- und Rückwärtsfahren (Ausgenommen sind Zweiräder und Fahrräder mit Rücktrittbremse)



VR1F Motor des Silent Elektrosystems

Van Raam E-Bike App

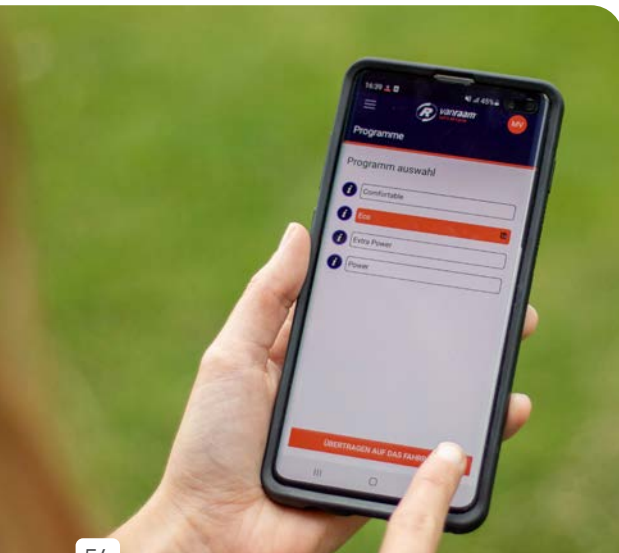

Smart E-Bike mit App

Alle Elektrofahrräder von Van Raam sind Smart E-Bikes. Das bedeutet, dass sie mit dem Internet (IOT connected) verbunden sind und dass Sie Informationen über Ihr Fahrrad in der Van Raam App auf Ihrem Telefon einsehen können. Sie können diese App, aus dem App-Shop Ihres Smartphones, gratis herunterladen und als Luxus-Fahrradcomputer verwenden. Sie können zum Beispiel die Rezepte anpassen, Ihre Durchschnittsgeschwindigkeit und die insgesamt zurückgelegte Strecke nach einer Fahrradtour einsehen.

Es ist auch möglich, über die gratis Van Raam Smart E-Bike App Benachrichtigungen über Ihr Fahrrad zu erhalten. Sie können zum Beispiel wählen, ob Sie eine Benachrichtigung erhalten möchten, wenn der Akkustand niedrig ist oder wenn der Akku zu kalt oder zu heiß ist.

Starthilfe

Das Silent Elektro-System ist serienmäßig mit einer Starthilfe ausgestattet: Auf Wunsch können Sie auf einer Strecke von circa 10 Metern mit 6 km pro Stunde fahren, ohne in die Pedale zu treten.

Smart Display

Sie können das Silent-System über das Smart-Display bedienen, das am Lenker des Fahrrads angebracht ist. Das Smart-Display hat 5 Tasten; die Ein-/Aus-Taste, 3 Tasten für die verschiedenen Unterstützungsstufen und die Taste für die Starthilfe.

Akku-Anzeige

Auf dem Smart-Display können Sie außerdem den Zustand Ihres Akkus anhand von farbigen LEDs erkennen. Diese Akku-Anzeige besteht aus fünf grünen LEDs, von denen die ganz linke auch rot leuchten kann. Die Akku-Anzeige zeigt an, wie voll der Akku ist. Diese Anzeige wird auch an dem Akku über LEDs dargestellt.

Akkus

Van Raam verwendet zwei verschiedene Lithium-Ionen-Akkus (Li-Ion). Die hochwertigen Akkus werden in den Niederlanden produziert und haben viele Ladezyklen. Van Raam liefert ein leises und leistungsstarkes (6 Ampere) Ladegerät mit den Akkus. Das Ladegerät ist mit einem selbstsuchenden Magnetanschluss ausgestattet, sodass es einfach mit einer Hand an den Akku angeschlossen werden kann.

Die elektrischen Dreiräder, parallel Tandems und Tandems sind alle mit einem Cube Li-Ion-Akku (11 oder 25 Ah) ausgestattet. Die anderen Elektrofahrräder haben einen Slim Li-Ionen-Akku (13 Ah). Die Akkus haben eine sehr hohe Kapazität, bei einigen Fahrrädern ist es möglich, zwei Akkus zu verwenden, die zusammen eine maximale Kapazität von 1760 Wh haben.

Es gibt drei verschiedene Motoren für das Silent Elektrosystem, den VR1F Silent, VR2F Silent HT und den VR2R Silent HT. Diese Motoren liefern eine maximale Dauernennleistung von 250 Watt.

Smart Display



Cube Li-ion Akku



Slim Li-ion Akku





Über Van Raam

Van Raam hat eine mehr als 110-jährige Geschichte und stellt seit fast 100 Jahren Fahrräder her. Seit 1986 liegt der Fokus auf Spezialfahrräder. Wir haben eine Geschichte als Rahmenbauer und sind Spezialist und Weltmarktführer für Spezialfahrräder.

Ein Van Raam Fahrrad macht Menschen mobil und gibt ihnen mehr Freiheit und Unabhängigkeit. Wir haben daher eine große Auswahl an Fahrrädern für Menschen mit Behinderung. Die einzigartigen Fahreigenschaften jedes Van Raam Fahrrades sorgen für ein besonderes Fahrgefühl.

Unsere holländischen Qualitätsfahrräder werden von unserer eigenen Entwicklungsabteilung entworfen und die Produktion erfolgt fast vollständig im Haus. Mit innovativen und modernen Fertigungstechniken und durch Hinzufügen von Optionen, Zubehör und Rahmenanpassungen können wir für fast jeden ein passendes Spezialfahrrad herstellen.



Lesen Sie mehr über Van Raam

Innovation

Bei Van Raam arbeiten wir ständig an der Verbesserung und Erneuerung unserer Produkte und Prozesse. Van Raam strebt in jeder Abteilung nach Innovation und Entwicklung. Wir sind deshalb stolz darauf, dass wir unsere Fahrräder mit modernsten Produktionsmethoden weiterentwickelt haben. Seit Dezember 2018 tun wir dies in unserer nachhaltigen und modernen Fahrradfabrik in Varsseveld.

Wir haben mehrere Innovationspreise gewonnen und sind führend in Smart Industry und Smart Working. Mit der Entwicklung von Smart Industry hat Van Raam begonnen, vieles zu digitalisieren, zu automatisieren und zu robotisieren.

Die folgenden innovativen Entwicklungen gelten für Van Raam:

- ✓ Fokus auf Nachhaltigkeit und die Umwelt
- ✓ Moderne Techniken und Maschinen
- ✓ Soziale Verantwortung des Unternehmens
- ✓ Zusammenarbeit mit Studenten (Innovationshub Innovar)


Van Raam

- ✓ Mehr als 110 Jahre Erfahrung
- ✓ Stolztes Familienunternehmen
- ✓ Macht Menschen mobil
- ✓ Maßgeschneidert
- ✓ Spezialist und Weltmarktführer
- ✓ Niederländische Qualität
- ✓ Innovative und moderne Produktionstechniken

3D-Scanner



Schweißroboter

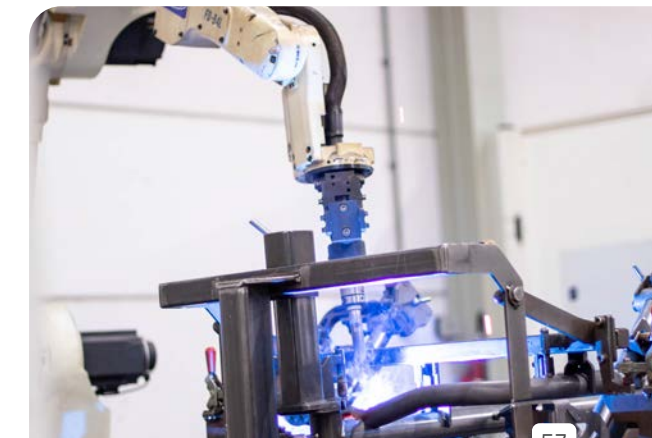

Produktionsprozess

Der Produktionsprozess eines Van Raam Fahrrads läuft wie folgt ab:

1. Entwurf

Unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung entwirft ein neues Fahrrad.



2. Produktion der Rahmen

Alle unsere Fahrradrahmen bestehen aus Stahlrohren, die von verschiedenen Maschinen bearbeitet werden. Dazu gehören computergesteuerte Fräsmaschinen und eine 3D-Lasermaschine. Unser Schweißroboter und unsere Schweißer schweißen alle bearbeiteten Rohre zusammen, um den Rahmen zu bilden.



3. Strahlen und Pulverbeschichten

In einer Strahlkabine werden alle Rahmen gestrahlt und anschließend in unserer eigenen Lackieranlage pulverbeschichtet. Ein Van Raam Fahrrad kann in fast jeder möglichen RAL-Farbe pulverbeschichtet werden.



4. Rad Montage

In unserer Rad Montage montieren wir alle Räder selbst. Wir setzen die Speichen in alle Räder selbst ein und mit einer Maschine wird das Felgenband auf die Felge gelegt. Nach dem Anbringen des Felgenbandes werden die Speichen angezogen und es wird geprüft, ob die Spannung korrekt ist oder ob sie noch eingestellt werden muss. Dann werden der Fahrradschlauch und der äußere Reifen montiert. Danach ist das Rad bereit für die Montage am Fahrrad.



5. Zusammentragen der Teile

Im automatischen Lager werden alle Teile zusammengetragen, die von den Mechanikern an den Rahmen des Van Raam Fahrrads montiert werden.

Dies variiert je nach Modell, da bei jedem Fahrrad viele Optionen und Zubehörteile gewählt werden können. Einige Teile stellen wir selbst her, wie zum Beispiel die Achsen.



6. Montage

Unsere Mechaniker montieren dann alle Teile an das Fahrrad. Auch die Optionen wie der Elektromotor, Fußschalen, Rückenstütze und Stockhalter sind am Rad montiert.



7. Endkontrolle

Wenn das Fahrrad komplett fertig ist, wird es von unseren Mechanikern noch einmal überprüft und getestet.

Wenn das Fahrrad von der Endkontrolle abgenommen wurde, wird das Fahrrad transportfertig gemacht und an den Händler/Fahrradladen geschickt, der es bestellt hat. Die Auslieferung an den Kunden übernimmt der Händler/Fahrradladen.



Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone/Tablet und entdecken Sie auf der Website alles über die Herstellung eines Spezialfahrrads.





Anschaffung

Ausstellungsraum

In unserem geräumigen Ausstellungsraum in Varsseveld stehen alle Fahrräder von Van Raam. Neben Dreirädern, Rollstuhlfahrrädern, Tandems, Fahrräder mit tiefem Einstieg, einer Laufhilfe, einem Transportfahrrad und dem Elektromobil-Dreirad sind auch die beliebtesten Optionen und Zubehörteile im Ausstellungsraum vertreten. Sie können den Van Raam Ausstellungsraum nach Vereinbarung besuchen. Sehen Sie sich die meistgewählten Optionen und Zubehörteile auf Seite 52 an.

Van Raam hat auch einen Ausstellungsraum/Beratungszentrum in Deutschland. Hier können Sie alle Fahrräder von Van Raam Probe fahren, genau wie in den Niederlanden.

Pobefahrt bei Van Raam

Eine ausgiebige Probefahrt mit einem Van Raam Fahrrad ist sehr wichtig, denn ein Spezialrad unterscheidet sich stark von einem normalen Zweirad.

Haben Sie Interesse an einem Van Raam Fahrrad? Sie können einen Termin für eine Probefahrt mit einem oder mehreren Fahrrädern in einem unserer Ausstellungsräume vereinbaren. Sie können einen Termin über das Kontaktformular auf unserer Website anfragen, oder kontaktieren Sie Van Raam per Telefon. Während des Termins werden Sie von unseren Beratern bei einer Tasse Kaffee oder Tee fachkundig beraten. In Varsseveld können Sie dies sogar auf einer Teststrecke.

Planen
Sie eine
Probefahrt!



Konfigurator

Bei Van Raam haben Sie die Möglichkeit, Ihr eigenes Fahrrad online zusammenzustellen. Hier können Sie alle Möglichkeiten für Ihr Fahrrad auswählen und beliebige Optionen hinzufügen.

Wenn Sie Ihr Fahrrad nach Ihren Wünschen zusammengestellt haben, können Sie genau sehen, was Ihr einzigartiges Van Raam Fahrrad kosten wird.



Scannen Sie diesen QR-Code und stellen Sie Ihr Fahrrad mit dem Online-Konfigurator zusammen.

Händler

Der Verkauf von Van Raam-Fahrrädern wird von unseren Händlern durchgeführt. Van Raam Fahrräder sind international bei den auf unserer Website aufgeführten Händlern erhältlich. Wir haben verschiedene Arten von Händlern, zum Beispiel Premium-Händler, Reha-Spezialisten, Servicepartner und Verleihstation.

Bei einigen Händlern ist es auch möglich, eine Probefahrt zu machen. Die Premium-Händler haben mehrere Fahrräder von Van Raam in ihrem Ausstellungsraum. Außerdem ist bei Premium-Händlern immer ein Fachmann anwesend und der Händler verfügt über eine Werkstatt und die Kompetenz, Servicearbeiten durchzuführen.

Sehen Sie welcher Händler bei Ihnen in Ihrer Nähe ist auf www.vanraam.com/handler.



Service

Garantie

Van Raam steht für Qualität. Beim Kauf eines Van Raam Fahrrads erhalten Sie eine umfangreiche Herstellergarantie.

Wir haben Fachhändler in der ganzen Welt, die unsere Spezialfahrräder verkaufen. Die Van Raam Händler bestellen die Fahrräder und kümmern sich um die Auslieferung an den Kunden. Sie bieten auch Service und übernehmen die Garantie.

Es ist wichtig, dass Ihr Van Raam Fahrrad mindestens einmal pro Jahr von einem Fachhändler überprüft wird, um weiterhin die Garantie in Anspruch nehmen zu können. Dies sorgt auch für ein dauerhaft optimales Fahrgefühl.



Wartung des Van Raam Fahrrads

Ein gut gewartetes Fahrrad bereitet Ihnen mehr und länger Freude am Fahren. Um Ihr Fahrrad in optimalem Zustand zu halten, können leichte Wartungsarbeiten (wie Reinigen und Schmieren des Fahrrads) und regelmäßige Einstellarbeiten durchgeführt werden. Dies ist pro Van Raam Fahrrad unterschiedlich. Es ist wichtig zu wissen, was selbst gewartet werden kann und was vom Van Raam Händler erledigt werden muss.

Weitere Informationen zur Wartung finden Sie in der Gebrauchsanweisung des jeweiligen Fahrrads. Gebrauchsanweisungen finden Sie auf der Produktseite des Fahrrads unter www.vanraam.com.

Reparaturen über Ihren Van Raam Händler

Wenn trotz ordnungsgemäßer Wartung eine Störung oder ein Defekt an einem Fahrrad auftritt, können Sie sich zur Reparatur an Ihren Van Raam Händler wenden. Reparaturen, Wartungen und Änderungen werden mit Originalteilen von Van Raam durchgeführt. Wenn ein Händler noch eine Frage hat, kann er sich jederzeit an die Serviceabteilung von Van Raam wenden.

Folgen Sie Van Raam online

Alle Neuigkeiten und Informationen über Van Raam finden Sie auf unserer Website www.vanraam.com. Folgen Sie uns auf den Social Media Kanälen YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest und LinkedIn und verpassen Sie nichts mehr. Abonnieren Sie unseren YouTube Kanal und entdecken Sie jede Woche ein neues Produkt-, Instruktions- oder Informationsvideo.



Kolophon

Dieser Produktkatalog ist eine Veröffentlichung von Van Raam Reha Bikes B.V. Kein Teil dieses Produktkatalogs darf ohne schriftliche Genehmigung von Van Raam Reha Bikes B.V. vervielfältigt und/oder durch Druck, Fotokopie, Aufzeichnung, elektronisch oder auf irgendeine andere Weise veröffentlicht werden. Die Abbildungen der Fahrräder können Optionen enthalten, die nicht in der Standardausführung enthalten sind. Außerdem können nach der Produktion dieses Produktkatalogs Änderungen an dem Fahrrad vorgenommen worden sein. Lesen Sie vor der Benutzung unserer Fahrräder immer die Bedienungsanleitung. Copyright ©. Druck- und Satzfehler vorbehalten. Ausgabe 1.





Van Raam

Hersteller von Spezialfahrrädern

Guldenweg 23

7051 HT Varsseveld, Niederlande

☎ +31 (0)315 - 25 73 70

✉ info@vanraam.com

🌐 www.vanraam.com

